

NeoRecormon jeringa precargada

Instrucciones de uso

Las siguientes instrucciones explican cómo administrar una inyección de NeoRecormon. Asegúrese de leer, comprender y seguir las instrucciones de uso así como el prospecto antes de inyectar NeoRecormon. El profesional sanitario le mostrará cómo preparar e inyectar NeoRecormon correctamente antes de usarlo por primera vez. No se inyecte usted mismo a menos que haya recibido entrenamiento. Consulte al profesional sanitario si necesita más formación.

NeoRecormon se puede administrar de 2 maneras, su médico decidirá qué manera es adecuada para usted:

- Administración intravenosa (en la vena o acceso venoso), sólo para ser realizada por profesionales sanitarios.
- Administración subcutánea (bajo la piel).

Antes de empezar a usar

- **No** quite la tapa de la aguja hasta que esté listo para inyectar NeoRecormon.
- **No** trate de quitar la jeringa en ningún momento.
- **No** vuelva a usar la misma jeringa.
- **No** lo use si la jeringa se ha caído o está dañada.
- **No** deje la jeringa sin vigilancia.
- Mantenga la jeringa y la aguja, así como el contenedor de eliminación de punzones o de objetos cortantes, fuera del alcance de los niños.
- Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el profesional sanitario.


Instrucciones de conservación

- Guarde la(s) jeringa(s) sin usar en el embalaje original y consérvela (s) en nevera entre 2 ° C y 8 ° C.
- Mantenga la jeringa NeoRecormon fuera de la luz directa del sol.
- **No** congelar.
- **No** lo use si la jeringa se ha congelado.
- Mantenga siempre la jeringa seca.


Materiales necesarios para administrar la inyección

Incluido en el embalaje:

- Jeringa (s) precargada NeoRecormon.

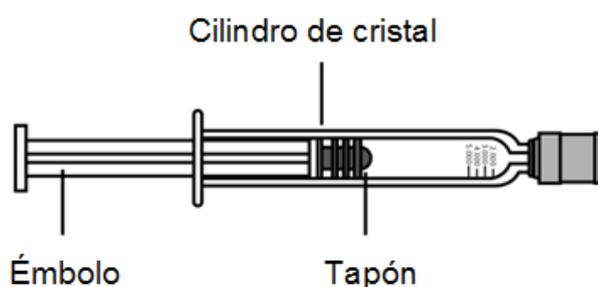

- Aguja (s) de inyección de 27G o 30G) (dependiendo de la dosis prescrita del medicamento) con protector de seguridad (utilizado para preparación, ajuste de la dosis e inyección del medicamento).

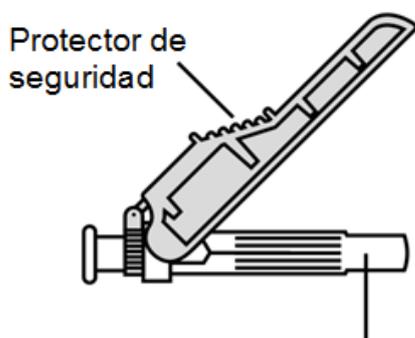

Cubierta de la aguja

Nota: Cada embaalaje contiene 1 jeringa / 1 aguja, 4 jeringas / 4 agujas o 6 jeringas / 6 agujas.

- Instrucciones de uso y prospecto.


No incluido en la caja:

- 1 toallita de alcohol.
- 1 gasa estéril seca.
- 1 recipiente resistente a la perforación o contenedor de objetos punzocortantes para la eliminación segura de la tapa de goma, la tapa de la aguja y la jeringa usada.

Preparación para la inyección

- 1 Encuentre una superficie de trabajo bien iluminada, limpia y plana.
 - Saque el cartonaje con la (s) jeringa (s) y la (s) aguja (s) fuera de la nevera
- 2 Compruebe que el cartonaje no se ha dañado y compruebe que la fecha de caducidad de la caja no ha pasado.
 - No utilizar si la fecha de caducidad ha pasado, si la jeringa se ha caído o dañado, o si el envase parece manipulado. En este caso, continúe con el *paso 19* y comuníquese con el profesional sanitario.
- 3 Saque una jeringa del cartonaje y una aguja de la caja de las agujas. Tenga cuidado al sacar la jeringa. Asegúrese de sujetar siempre la jeringa como se muestra en la imagen más abajo.
 - No ponga el cartonaje boca abajo para sacar la jeringa.
 - No manipule la jeringa sujetando el émbolo o la tapa de la aguja.

Observación: Si tiene un multipack, ponga el cartonaje con la (s) jeringa (s) y aguja (s) restantes en la nevera.

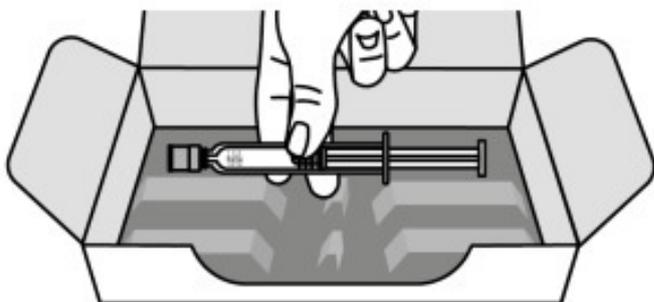

- 4 Inspeccione la jeringa y la aguja de cerca
 - Compruebe que la jeringa y la aguja no estén dañadas. No utilice la jeringa si se ha caído o si alguna parte de la jeringa parece estar dañada.
 - Verifique la fecha de caducidad en la jeringa y la aguja. No use la jeringa o la aguja si la fecha de caducidad ha pasado.


- Compruebe el líquido de la jeringa. El líquido debe ser transparente e incoloro. **No** utilice la jeringa si el líquido está turbio, decolorado o tiene partículas.

5 Coloque la jeringa sobre una superficie limpia y plana.

- Deje a un lado la jeringa durante 30 minutos para que pueda alcanzar la temperatura ambiente. Deje la tapa de la aguja puesta mientras se atempera.

- **No** acelere el proceso de calentamiento de ninguna manera, y no ponga la jeringa en un microondas o en agua tibia.

Observación: Si la jeringa no alcanza la temperatura ambiente, esto podría hacer que la inyección resulte incómoda y dificultar el empuje del émbolo.

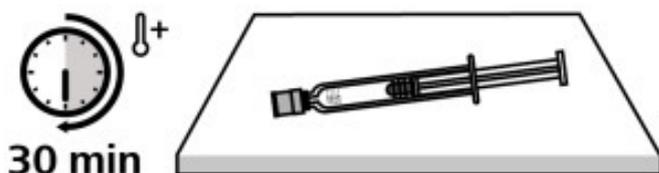

6 Fije la aguja a la jeringa.

- Retire la aguja de su ampolla.

- Tire de la tapa de goma del extremo de la jeringa (A).


- Deseche la tapa de goma en un recipiente resistente a la perforación o para el desecho de agujas inmediatamente.

- **No** toque la punta de la jeringa.


- **No** empuje ni tire del émbolo.

- Sostenga la jeringa por el cilindro y empuje la aguja sobre la jeringa (B).


- Gire suavemente hasta que quede completamente unido (C).

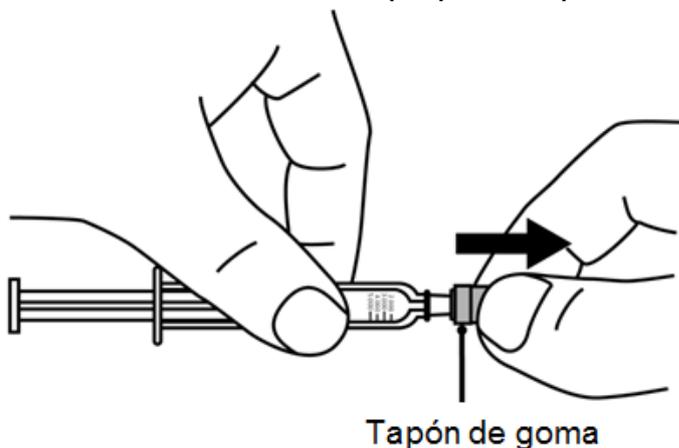

A)

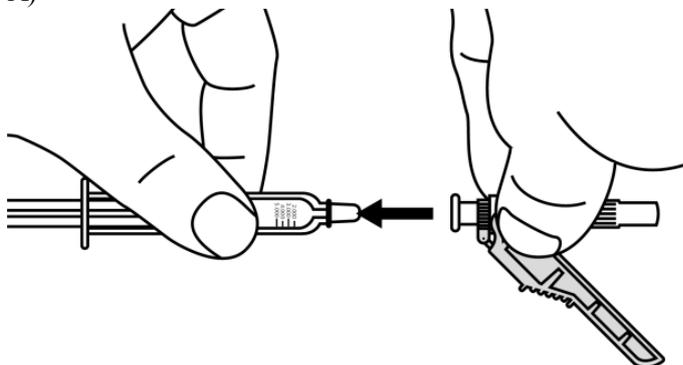

B)

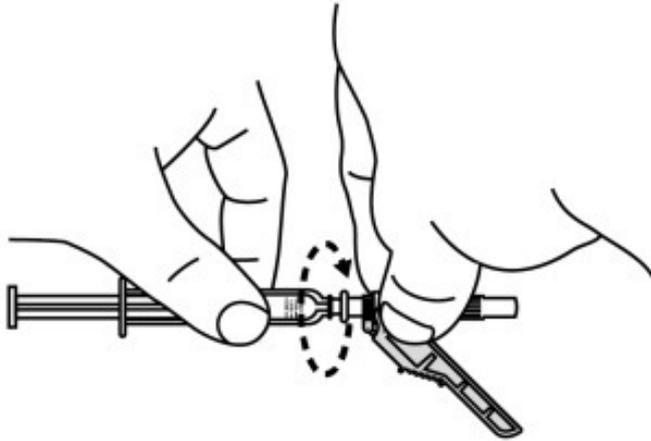


C)

7 Coloque la jeringa sobre una superficie limpia y plana hasta que esté lista para su uso.

8 Lávese las manos con agua y jabón.

9 Elija un área de inyección:

- Las áreas de inyección recomendadas son la parte superior de su muslo o la parte inferior de su abdomen debajo del ombligo. **No** inyecte dentro del área de 5 cm (2 pulgadas) directamente alrededor de su ombligo.
- Elija un área de inyección diferente para cada nueva inyección.
- **No** inyecte en lunares, cicatrices, hematomas o áreas donde la piel esté sensible, roja, dura o no intacta.
- **No** inyectar en la vena o en un músculo.

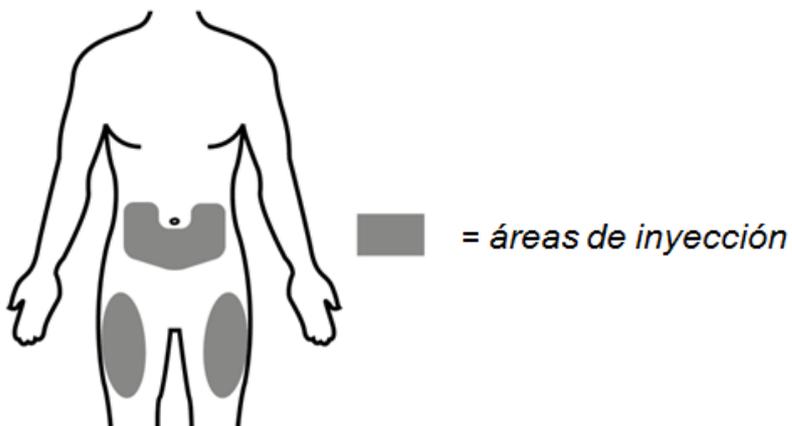


- 10 Limpie el lugar de la inyección con un toallita de alcohol y déjelo secar al aire durante 10 segundos.
- No ventilar ni soplar en el área limpia.
 - No toque el sitio de la inyección otra vez antes de poner la inyección.




La administración de la inyección subcutánea

- 11 Aleje la protección de seguridad de la aguja en dirección al cilindro de la jeringa.

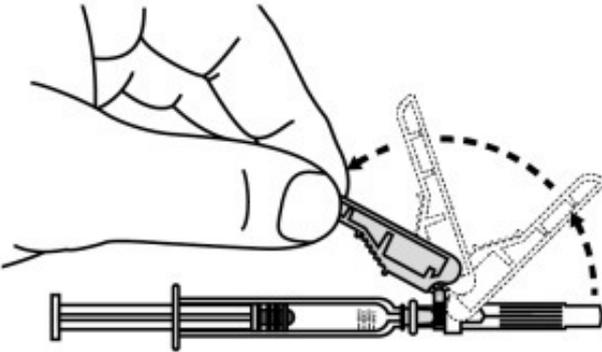


- 12 Sujete la jeringa y la aguja firmemente en el eje y retire cuidadosamente la tapa de la aguja de inyección de la jeringa. Utilice la jeringa dentro de los 5 minutos después de la retirada de la tapa; De lo contrario, la aguja puede obstruirse.
- No sujete el émbolo mientras retira la tapa de la aguja.
 - No toque la aguja después de retirar la tapa de la aguja.
 - No vuelva a tapar la aguja.


Deseche la tapa de la aguja inmediatamente.

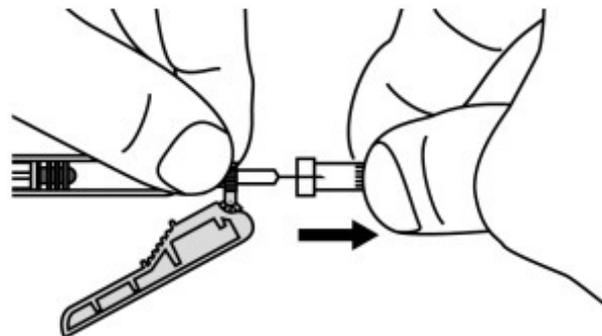

- 13 Sostenga la jeringa con la aguja hacia arriba. Retire las burbujas de aire más grandes golpeando suavemente el cilindro de la jeringa con los dedos hasta que las burbujas de aire suban hasta la parte superior de la jeringa. A continuación, empuje lentamente el émbolo hacia arriba para empujar las burbujas de aire fuera de la jeringa.

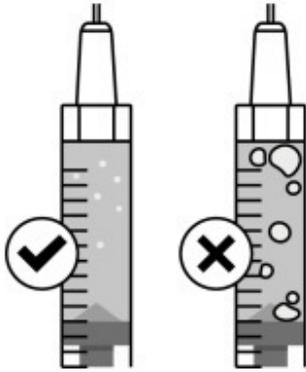


- 14 Ajuste la dosis recetada empujando lentamente el émbolo.

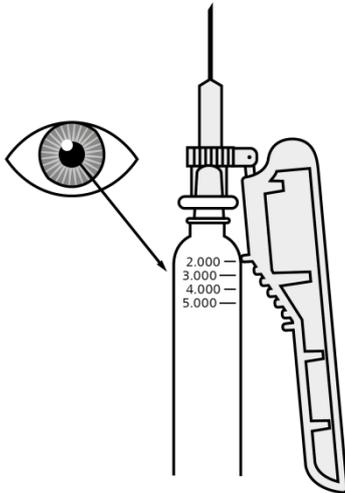


- 15 Pellizque el punto de inyección seleccionado e inserte completamente la aguja en un ángulo de 45° a 90° con una acción rápida y firme.

- No toque el émbolo mientras inserta la aguja en la piel
- No inserte la aguja a través de la ropa.

Una vez que ha insertado la aguja, suelte el pellizco y sujete la jeringa firmemente en su lugar.

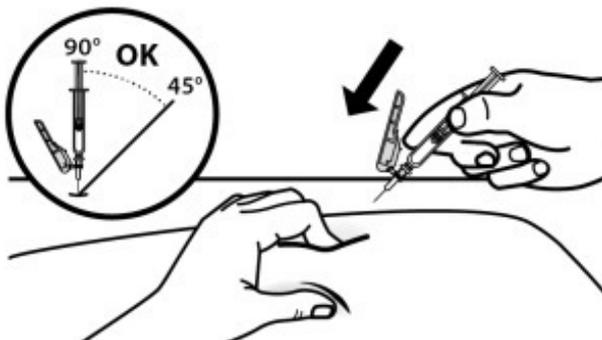


- 16** Inyecte lentamente la dosis prescrita empujando suavemente el émbolo hasta el fondo
- Retire la aguja y la jeringa del lugar de inyección en el mismo ángulo que la insertó.

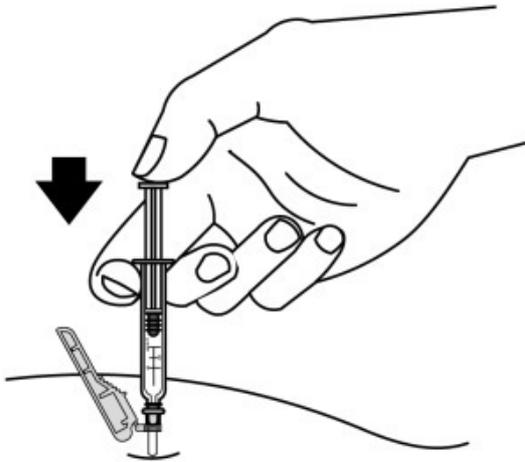


Después de la inyección

- 17** Puede haber un poco de sangrado en el lugar de la inyección. Puede presionar la gasa estéril seca sobre el lugar de la inyección. No frote el lugar de la inyección.
- Si es necesario, puede cubrir el lugar de la inyección con un vendaje pequeño.
 - En caso de contacto con la medicación, lave con agua el área que tocó la medicación.
- 18** Desplace el protector de seguridad hacia delante 90 °, alejándolo del cilindro de la jeringa (A). Sosteniendo la jeringa con una mano, presione el protector de seguridad contra una superficie plana con un movimiento firme y rápido hasta que escuche un "clic" (B).
- Si no escucha un clic, observe que la aguja está totalmente cubierta por el protector de seguridad.
 - Mantenga los dedos detrás del protector de seguridad y lejos de la aguja en todo momento.

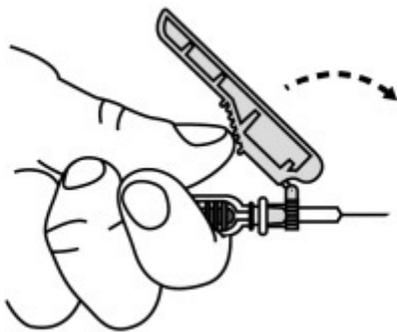

A)

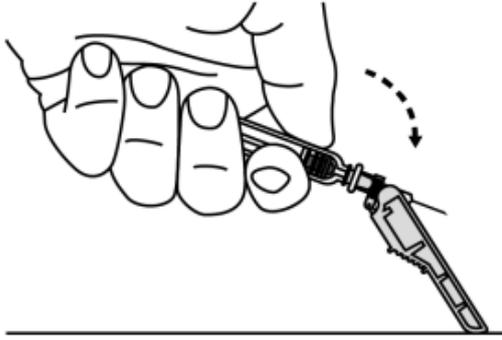

B)

19 Ponga la jeringa usada en un recipiente de eliminación de objetos punzantes inmediatamente después de usarlo.

- **No** intente quitar la aguja de inyección usada de la jeringa usada.
- **No** vuelva a tapar la aguja de inyección con la tapa.
- **No** tire la jeringa en la basura de su casa.

Importante: Mantenga siempre el contenedor de eliminación de objetos punzantes fuera del alcance de los niños.