


Praluent 75 mg solución inyectable en pluma precargada alirocumab

Instrucciones de uso

En la siguiente imagen se muestran las partes de la pluma de Praluent.

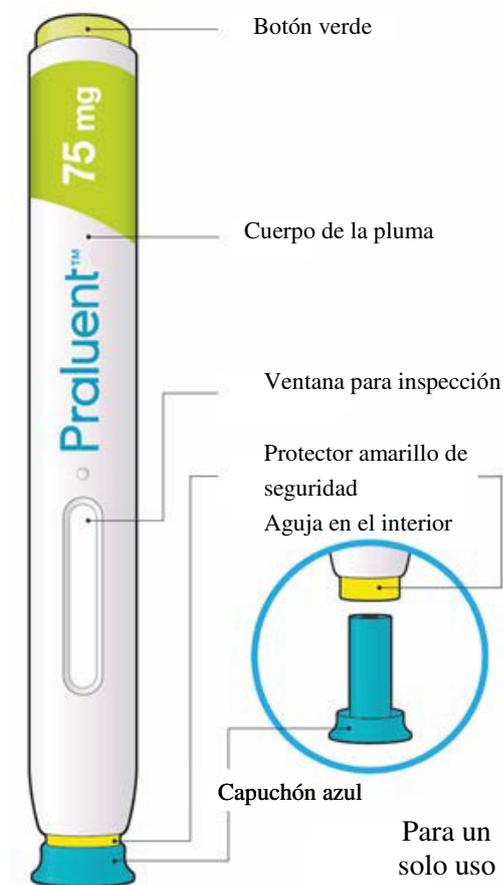

Información importante

- Se trata de una pluma precargada de un solo uso. Contiene 75 mg de Praluent (alirocumab) en 1 ml.
- El medicamento se inyecta bajo la piel y puede administrárselo usted mismo u otra persona (cuidador).
- Esta pluma se debe usar solamente para una inyección y luego se debe desechar.

Qué debe hacer

- ✓ Mantener la pluma de Praluent fuera de la vista y del alcance de los niños.
- ✓ Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar la pluma de Praluent.
- ✓ Siga estas instrucciones cada vez que use una pluma de Praluent.
- ✓ Conserve las plumas sin usar en la nevera entre 2 °C y 8 °C. Para más información sobre condiciones de conservación, ver el prospecto aparte de Praluent.

Qué no debe hacer

- ✗ No toque el protector amarillo de seguridad.
- ✗ No utilice la pluma si se ha caído al suelo o está dañada.
- ✗ No utilice la pluma si falta el capuchón azul o no está firmemente sujeto.
- ✗ No reutilice la pluma.
- ✗ No agite la pluma.

- ✗ No congele la pluma.
- ✗ No esponga la pluma a la luz solar directa.

Conserve este prospecto. Si tiene alguna duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero o llame al número de sanofi-aventis que aparece en el prospecto.

PASO A: preparación de la inyección

Antes de empezar necesitará:

- la pluma de Praluent
- toallitas empapadas en alcohol
- bolita de algodón o gasa
- un contenedor para objetos punzantes (ver paso B, 8).


① Mirar la etiqueta de la pluma.

- Compruebe que contiene el medicamento correcto y la dosis correcta.
- Compruebe la fecha de caducidad de la pluma; no la utilice si está caducada.



② Mirar la ventana para inspección.

- Compruebe que el líquido es transparente, entre incoloro y amarillo pálido y que no contiene partículas; en caso contrario, no utilizar la pluma (ver imagen A).
- Es posible que vea una burbuja de aire. Eso es normal.
- No utilice la pluma si la ventana para inspección tiene un color amarillo sólido (ver imagen B).

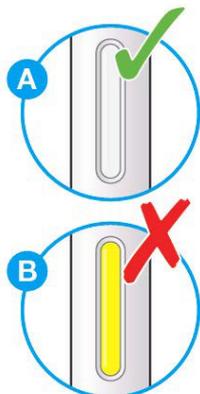


③ Deje que la pluma se atempere a temperatura ambiente de 30 a 40 minutos.

- Deje que la pluma se atempere por sí sola, no intente calentarla.
- No vuelva a meter la pluma en la nevera.

④ Preparar el lugar de la inyección.

- Lávese las manos con agua y jabón y séqueselas con una toalla.
- Puede inyectárselo en:


- el muslo
 - el vientre (salvo en la zona de 5 cm alrededor del ombligo)
 - la parte superior externa de su brazo
- (Ver imagen).
- Para inyectarse puede estar de pie o sentado.
 - Limpie la piel en la zona de la inyección con una toallita empapada en alcohol.
 - No escoja una zona de la piel que esté dolorida, endurecida, enrojecida o inflamada.
 - No escoja una zona cercana a una vena visible.
 - Inyéctese cada vez en una zona diferente.
 - No se inyecte Praluent conjuntamente con otros medicamentos inyectables en la misma zona.

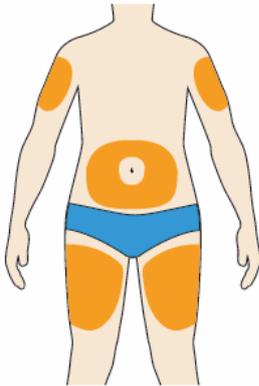

PASO B: cómo inyectarse

① Después de completar todos los pasos del “Paso A: preparación de la inyección”, retire el capuchón azul.

- No retire el capuchón hasta que esté preparado para inyectarse.
- No vuelva a colocar el capuchón azul.

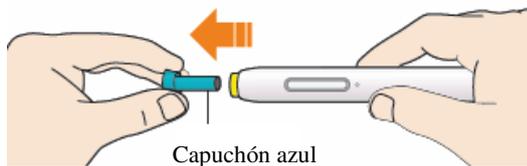


② Sustener la pluma de Praluent de la siguiente manera.

- No toque el protector amarillo de seguridad.
- Asegúrese de que se vea la ventana para inspección.



③ **Presionar el protector amarillo de seguridad sobre la piel formando un ángulo aproximado de 90°.**

- Presione y agarre con firmeza la pluma contra el cuerpo hasta que el protector amarillo de seguridad ya no quede a la vista. La pluma no funcionará si el protector amarillo de seguridad no está pulsado totalmente.
- Si es necesario, pellizque la piel para asegurarse de que el lugar de la inyección es firme.

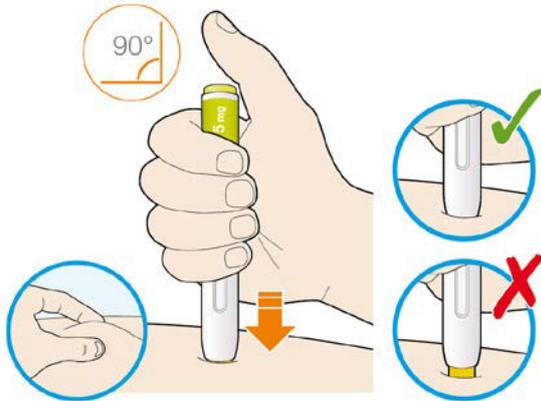

④ **Presionar y soltar inmediatamente el botón pulsador verde con el pulgar.**

- Escuchará un clic. En ese momento habrá empezado la inyección.
- La ventana para inspección comenzará a ponerse de color amarillo.



⑤ **Mantener la pluma contra la piel después de soltar el botón pulsador.**

- La inyección puede durar hasta 20 segundos.




⑥ Comprobar si la ventana para inspección está de color amarillo antes de retirar la pluma.

- No retire la pluma hasta que toda la ventana para inspección esté amarilla.
- La inyección se habrá completado cuando la ventana para inspección se haya vuelto completamente amarilla y puede que escuche un segundo clic.
- Si la ventana para inspección no se vuelve completamente amarilla, llame a sanofi-aventis para solicitar ayuda. No se administre una segunda dosis sin hablar antes con su médico, farmacéutico o enfermero.



⑦ Retirar la pluma de la piel.

- No frote la superficie de la piel después de la inyección.
- Si se produce alguna hemorragia, presione el lugar de la inyección con una bolita de algodón o gasa hasta que deje de sangrar.

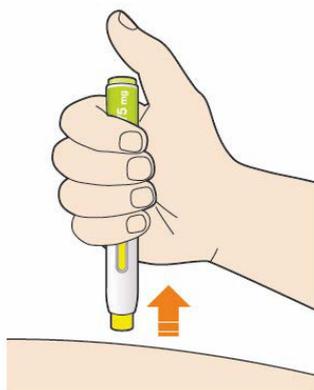

⑧ Desechar la pluma y el capuchón.

- No vuelva a colocar el capuchón azul.
- Deseche la pluma y el capuchón en un contenedor para objetos punzantes inmediatamente después de su uso.
- Pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero cómo deshacerse del contenedor.
- Mantener siempre el contenedor fuera de la vista y del alcance de los niños.

