

## Instrucciones de uso de Ozempic 1 mg solución inyectable en pluma precargada

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar su pluma precargada Ozempic.

**No utilice la pluma sin haber recibido la formación adecuada** de su médico o enfermero.

Empiece comprobando la pluma para **asegurarse de que contiene Ozempic 1 mg** y después observe las siguientes imágenes para familiarizarse con las distintas partes de la pluma y la aguja.

**Si es usted invidente o tiene visión reducida y no puede leer el contador de dosis de la pluma, no utilice esta pluma sin ayuda.** Busque ayuda de una persona que vea bien y esté formada en el uso de la pluma precargada Ozempic.

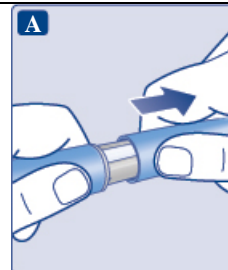
Su pluma es una pluma precargada dosificadora. Contiene 4 mg de semaglutida y puede seleccionar únicamente dosis de 1 mg. La pluma está diseñada para ser utilizada con agujas desechables NovoFine y NovoTwist de hasta 8 mm de longitud. El envase incluye agujas NovoFine Plus.

### Ozempic pluma precargada y aguja (ejemplo)

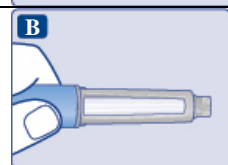


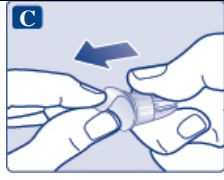
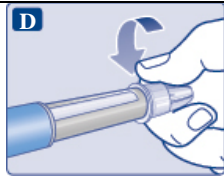
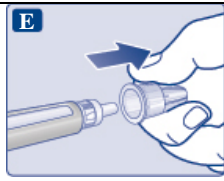
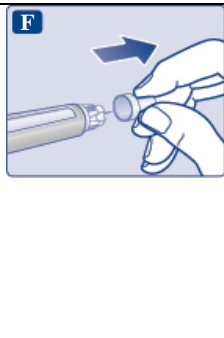


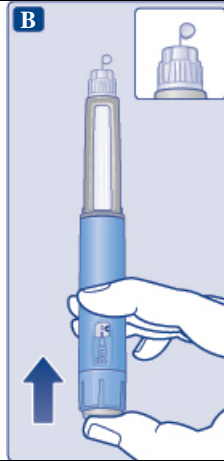
#### 1. Preparación de la pluma con una aguja nueva


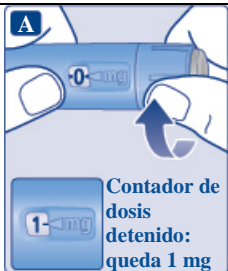
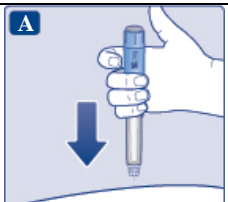
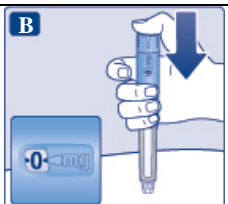
- **Compruebe el nombre y el color de la etiqueta** de su pluma para asegurarse de que contiene Ozempic. Esto es especialmente importante si utiliza más de un tipo de medicamento inyectable. El uso de un medicamento incorrecto podría causar graves daños a su salud.
- **Retire el capuchón de la pluma.**

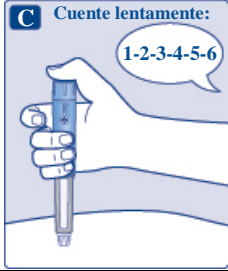
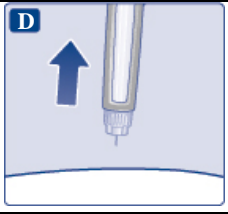
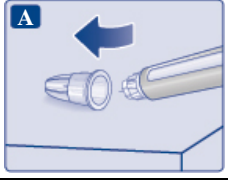
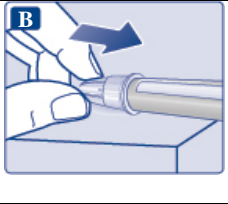
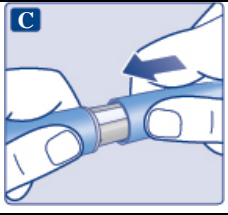





- **Compruebe que la solución de la pluma es transparente e incolora.** Mire a través de la ventana de la pluma. Si la solución tiene un aspecto turbio o coloreado, no utilice la pluma.



<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Coja una aguja nueva</b> y retire la lengüeta de papel. Si la lengüeta de papel está rota, no utilice la aguja ya que la esterilidad de esta no está garantizada.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Coloque la aguja recta en la pluma. Enrósquela hasta que quede apretada.</b></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Retire el capuchón exterior de la aguja y guárdelo para más tarde.</b> Lo necesitará después de la inyección para retirar la aguja de la pluma de forma segura.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Retire el capuchón interior de la aguja y deséchelo.</b> Si intenta volver a colocarlo, se podría pinchar accidentalmente con la aguja.</li> </ul> <p>Puede aparecer una gota de solución en la punta de la aguja. Esto es normal, pero a pesar de ello debe comprobar el flujo si se trata de una pluma nueva y es la primera vez que la utiliza. Consulte el paso 2 “Comprobación del flujo”.</p> <p><b>No coloque una aguja nueva</b> en la pluma hasta que esté listo para ponerse la inyección.</p>	
<p><b>⚠ Utilice siempre una aguja nueva para cada inyección.</b> Así se reduce el riesgo de que las agujas se atasquen, contaminación, infección y dosificación inexacta.</p>	
<p><b>⚠ Nunca utilice una aguja doblada ni dañada.</b></p>	
<p><b>2. Comprobación del flujo</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Compruebe el flujo antes de la primera inyección con cada pluma nueva.</b> Si la pluma está ya en uso, vaya al paso 3, “Selección de la dosis”.</li> <li>• Gire el selector de dosis <b>hasta que en el contador de dosis aparezca el símbolo de comprobación de flujo</b> (  ).</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sujete la pluma con la aguja apuntando hacia arriba. <b>Presione y mantenga presionado el pulsador</b> hasta que el contador de dosis vuelva a 0. El 0 debe quedar alineado con el marcador de dosis. Una gota de solución debe aparecer en la punta de la aguja.</li> </ul>	
<p>Puede que una pequeña gota se quede en la punta de la aguja, pero no se inyectará. <b>Si no aparece ninguna gota,</b> repita el paso 2 “Comprobación del flujo” un máximo de 6 veces. Si aún no se ve ninguna gota, cambie la aguja y repita el paso 2 “Comprobación del flujo” una vez más.</p>	

<p><b>Si, a pesar de todo, no aparece ninguna gota,</b> deseche la pluma y utilice una nueva.</p>	
<p><b>⚠ Asegúrese siempre de que aparezca una gota</b> en la punta de la aguja antes de utilizar una pluma nueva por primera vez. Así se asegura de que la solución fluye. Si no aparece ninguna gota, <b>no</b> se inyectará medicamento, aunque el contador de dosis se mueva. <b>Esto puede indicar que la aguja está obstruida o dañada.</b> Si no comprueba el flujo antes de la primera inyección con cada nueva pluma, es posible que no reciba la dosis prescrita ni logre el efecto previsto de Ozempic.</p>	
<p><b>3. Selección de la dosis</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gire el selector de dosis hasta seleccionar 1 mg.</b> Continúe girando hasta que el contador de dosis se detenga y muestre 1 mg.</li> </ul>	
<p>Solamente el contador de dosis y el marcador de dosis mostrarán que se ha seleccionado 1 mg. El selector de dosis emite un clic diferente cuando se gira hacia delante, hacia atrás o supera 1 mg. No cuente los clics de la pluma.</p>	
<p><b>⚠ Antes de inyectarse este medicamento, utilice siempre el contador de dosis y el marcador de dosis para ver que ha seleccionado 1 mg.</b> No cuente los clics de la pluma. La dosis de 1 mg en el contador de dosis tiene que estar alineada de manera exacta con el marcador de dosis para asegurar que recibe la dosis correcta.</p>	
<p><b>Cuánta solución queda</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Para saber cuánta solución queda,</b> utilice el contador de dosis: gire el selector de dosis hasta que el <b>contador de dosis se detenga.</b> Si muestra 1, queda <b>al menos 1 mg</b> en la pluma. Si el <b>contador de dosis se detiene antes de 1 mg,</b> no queda suficiente solución para una dosis completa de 1 mg.</li> </ul>	
<p><b>⚠ Si no queda suficiente solución en la pluma para una dosis completa, no la utilice. En su lugar, utilice una nueva pluma Ozempic.</b></p>	
<p><b>4. Inyección de la dosis</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Introduzca la aguja bajo la piel</b> tal como le ha enseñado su médico o enfermero.</li> <li>• <b>Compruebe que puede ver el contador de dosis.</b> No lo tape con los dedos. Esto podría interrumpir la inyección.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Presione y mantenga presionado el pulsador hasta que el contador de dosis muestre 0.</b> El 0 debe quedar alineado con el marcador de dosis. En ese momento puede que oiga o note un clic.</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mantenga la aguja bajo la piel</b> después de que el contador de dosis haya vuelto a 0 y <b>cuente lentamente hasta 6</b>. Esto garantiza que se administra la dosis completa.</li> <li>• Si extrae antes la aguja, puede que vea salir solución de la punta de la aguja. En tal caso, no se habrá administrado la dosis completa.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Extraiga la aguja de la piel.</b> Si aparece sangre en el lugar de inyección, presione ligeramente. No frote la zona.</li> </ul>	
<p>Puede aparecer una gota de solución en la punta de la aguja después de la inyección. Esto es normal y no afecta a su dosis.</p>	
<p><b>⚠ Observe siempre el contador de dosis para saber cuántos mg se inyecta.</b> Mantenga presionado el pulsador hasta que el contador de dosis indique 0.</p> <p><b>Cómo detectar si la aguja está obstruida o dañada</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Si no aparece el 0 en el contador de dosis después de presionar continuamente el pulsador, puede que haya usado una aguja obstruida o dañada.</li> <li>– En este caso, <b>no</b> habrá recibido nada de medicamento, incluso aunque el contador de dosis se haya movido de la dosis original que fijó.</li> </ul> <p><b>Qué hacer si la aguja está obstruida</b></p> <p>Cambie la aguja tal como se describe en el paso 5 “Después de la inyección” y repita todos los pasos desde el paso 1 “Preparación de la pluma con una aguja nueva”. Asegúrese de seleccionar la dosis completa que necesita.</p> <p><b>No toque nunca el contador de dosis durante la inyección.</b> Esto puede interrumpir la inyección.</p>	
<p><b>5. Después de la inyección</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Introduzca la punta de la aguja en su capuchón exterior</b>, colocado sobre una superficie plana, sin tocar la aguja ni el capuchón exterior.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando la aguja quede protegida, <b>presione con cuidado el capuchón exterior de la aguja hasta el fondo.</b></li> <li>• <b>Desenrosque la aguja</b> y deséchela con cuidado de acuerdo con la normativa local. Consulte a su médico, farmacéutico o enfermero sobre la eliminación de elementos punzantes.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ponga el capuchón a la pluma</b> después de cada uso para proteger la solución de la luz.</li> </ul>	
<p><b>Deseche siempre la aguja después de cada inyección</b> para garantizar que las inyecciones se administran correctamente y evitar que las agujas se atasquen. Si la aguja está obstruida, <b>no</b> se inyectará <b>nada</b> de medicamento.</p> <p>Cuando la pluma esté vacía, deséchela <b>sin</b> la aguja puesta, siguiendo las instrucciones de su médico, enfermero o farmacéutico o de las autoridades locales.</p>	

 	<p><b>No intente volver a poner nunca el capuchón interior en la aguja.</b> Se podría pinchar con la aguja.</p> <p><b>Retire siempre la aguja de la pluma inmediatamente después de cada inyección.</b> Así se reduce el riesgo de que las agujas se atasquen, contaminación, infección, pérdida de solución y dosificación inexacta.</p>
	<p><b>Otra información importante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenga siempre la pluma y las agujas <b>fuera de la vista y del alcance de otras personas</b>, especialmente de los niños.</li> <li>• <b>Nunca comparta</b> la pluma ni las agujas con otras personas.</li> <li>• Las personas que atienden a los pacientes deben <b>tener mucho cuidado cuando manejen agujas usadas</b> para evitar pinchazos accidentales e infecciones.</li> </ul>
<p><b>Mantenimiento de su pluma</b></p>	
<p>Trate la pluma con cuidado. La manipulación brusca o el uso indebido pueden causar una dosificación inexacta. Si esto sucede, es posible que no logre el efecto previsto de este medicamento.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>No se inyecte Ozempic que haya estado congelado.</b> Si lo hace, es posible que no logre el efecto previsto de este medicamento.</li> <li>• <b>No se inyecte Ozempic que haya estado expuesto a luz solar directa.</b> Si lo hace, es posible que no logre el efecto previsto de este medicamento.</li> <li>• <b>No exponga la pluma a polvo, suciedad ni líquidos.</b></li> <li>• <b>No lave, moje ni lubrique la pluma.</b> Si es necesario, límpiela con un paño humedecido con un detergente suave.</li> <li>• <b>Procure que la pluma no se caiga</b> ni golpee contra superficies duras. Si se le cae la pluma o sospecha que pueda tener un problema, coloque una aguja nueva y compruebe el flujo antes de inyectarse.</li> <li>• <b>No intente rellenar la pluma.</b> Una vez vacía, se debe desechar.</li> <li>• <b>No trate de reparar la pluma</b> ni desmontarla.</li> </ul>	