

Instrucciones de uso

Fasenra 30 mg

Solución inyectable en pluma precargada

Benralizumab

Para inyección subcutánea

Pluma precargada de un solo uso

Antes de empezar a usar Fasenra Pen, un profesional sanitario deberá enseñarle a usted o a su cuidador cómo usarla correctamente.

Lea estas “Instrucciones de Uso” antes de empezar a usar Fasenra Pen y cada vez que tenga que realizar una nueva inyección. Podría haber nueva información. Esta información no sustituye a la consulta con su profesional sanitario respecto a su enfermedad o a su tratamiento.

Si usted o su cuidador tiene cualquier duda, consulte con su profesional sanitario.

Información importante

Conserve Fasenra en una nevera entre 2°C y 8°C en su envase de cartón hasta que esté listo para usarlo. Fasenra puede mantenerse a temperatura ambiente hasta 25 °C durante un máximo de 14 días. Tras retirarlo de la nevera, Fasenra se debe usar en 14 días, o desecharse.

No use su Fasenra Pen si:

- se ha congelado
- se ha caído o ha resultado dañada
- si se ha roto el sello de seguridad del cartonaje
- la fecha de caducidad (CAD) ya ha pasado

No:

- agite su Fasenra Pen
- comparta o reutilice su Fasenra Pen


Si ocurre algo de lo anterior, deseche Fasenra Pen en un contenedor para objetos punzantes y use una nueva pluma precargada.

Cada Fasenra Pen contiene 1 dosis de Fasenra que es de un solo uso.

Mantenga Fasenra y todos los medicamentos fuera de la vista y el alcance de los niños.

Su Fasenra Pen

No quite la capucha hasta que haya llegado al paso 6 de estas instrucciones y esté listo para inyectar Fasenra.

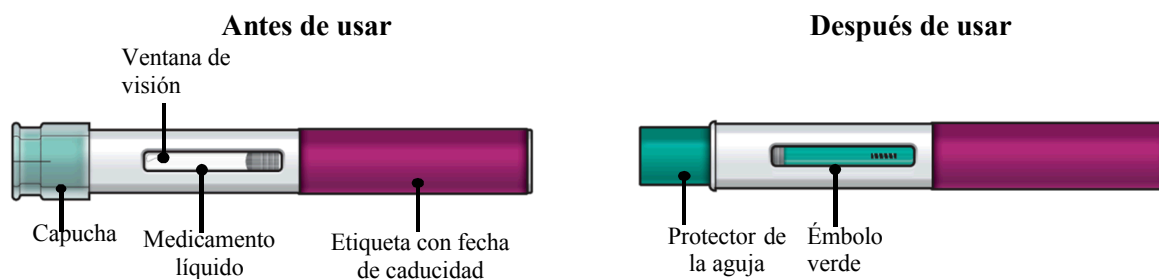

Paso 1 – Reúna los materiales

- 1 Fasenra Pen de la nevera
- 1 toallita con alcohol
- 1 bola de algodón o gasa
- 1 contenedor para objetos punzantes.

(Vea el paso 10 – Desechar la pluma de Fasenra de forma segura)



Pluma precargada



Toallita con alcohol



Bola de algodón o
gasa



Contenedor para objetos
punzantes

Paso 2 – Prepárese para usar su Fasenra Pen

Compruebe la fecha de caducidad (CAD). No la use si la fecha de caducidad ha pasado.

Deje que Fasenra se atempere a una temperatura ambiente de 20°C a 25°C durante 30 minutos antes de administrar la inyección.


No caliente la pluma de Fasenra de ninguna otra manera. Por ejemplo, no la caliente en un microondas o con agua caliente ni la ponga cerca de fuentes de calor.

Use Fasenra en los 14 días tras sacarlo de la nevera.

No quite la capucha hasta que haya llegado al paso 6



Paso 3 – Compruebe el líquido

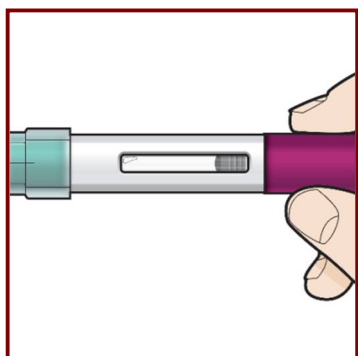


Observe el líquido de Fasenra Pen a través de la ventana de visión. El líquido debe ser claro y de incoloro a amarillento. Puede que contenga pequeñas partículas blancas.

No se inyecte Fasenra si el líquido está turbio, decolorado o si contiene partículas de gran tamaño.

Puede que vea una pequeña burbuja de aire en el líquido. Esto es normal. No necesita hacer nada al respecto.

Paso 4 –Escoja el lugar de la inyección

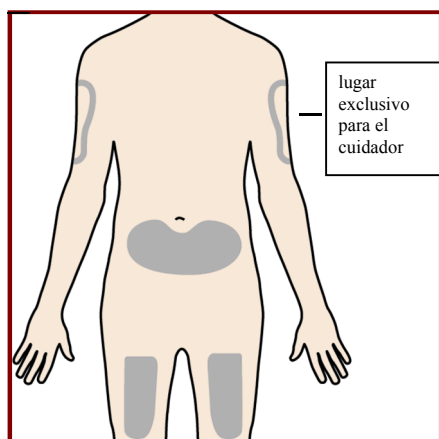

El lugar recomendado para la inyección es la parte anterior del muslo. Usted puede usar también la parte baja del abdomen.


No se lo inyecte:

- en 5 cm alrededor del ombligo
- donde la piel esté reblandecida, quemada, descamada o endurecida
- en cicatrices o piel dañada
- a través de la ropa

Un cuidador puede inyectárselo en la parte superior del brazo, muslo o abdomen. **No** trate de inyectárselo

usted mismo en la parte superior del brazo. Para cada inyección elija un lugar diferente, separados al menos 3 cm del lugar donde se realizó la inyección anterior.


Paso 5 – Limpie el lugar de la inyección

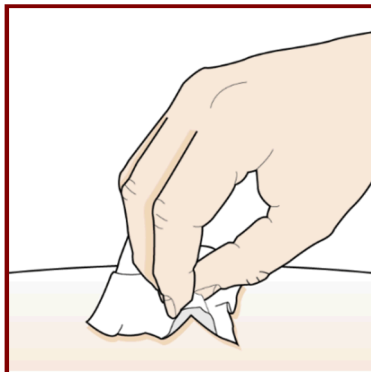

Lávese bien las manos con agua y jabón.
Limpie el lugar de la inyección con una toallita con alcohol con un movimiento circular. Deje que se seque al aire.

No toque el área limpiada antes de la inyección.
No abanique ni sople el área limpiada.

Paso 6 – Retire la capucha

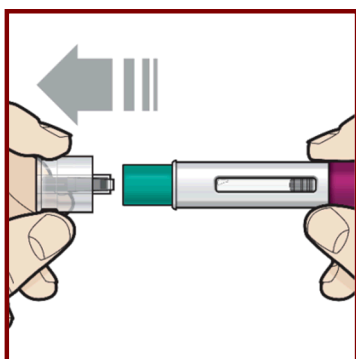

Sujete Faser Pen con una mano. Tire con cuidado de la capucha con la otra mano.
Deje la capucha a un lado para tirarla más tarde.
El protector verde de la aguja está ahora expuesto. Está ahí para evitar que toque la aguja.
No intente tocar la aguja o empujar el protector de la aguja con su dedo.
No intente volver a colocar la capucha de nuevo en Faser Pen. Podría ocasionar una inyección temprana o dañar la aguja.

Complete los siguientes pasos directamente tras quitar la capucha.


Paso 7 – Inyecte Fasenra

Siga las instrucciones de su profesional sanitario sobre cómo inyectar. Puede o bien pellizcar suavemente el lugar de inyección o administrar la inyección sin pellizcar la piel.

Inyecte Fasenra siguiendo los pasos de las figuras **a**, **b**, **c** y **d**.


Mantenga Fasenra Pen en el lugar para la inyección completa.

No cambie la posición de Fasenra Pen después de que la inyección haya empezado.

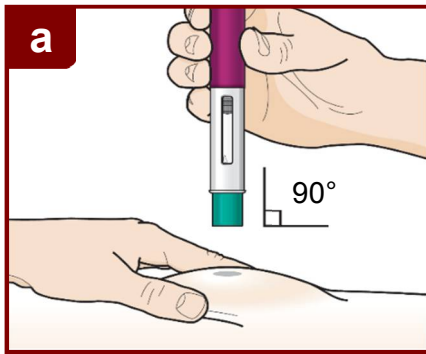


Posición de Fasenra Pen en el lugar de inyección.


Sítue el protector de la aguja de Fasenra Pen contra su piel (en un ángulo de 90 °). Asegúrese de que puede ver la ventana de visión.

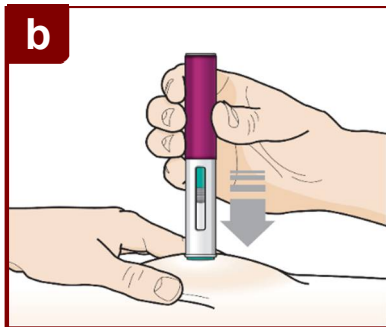

Presione hacia abajo firmemente. Oirá un click. Un “click” le indica que la inyección ha empezado. El émbolo verde se moverá hacia abajo en la ventana de visión durante la inyección.

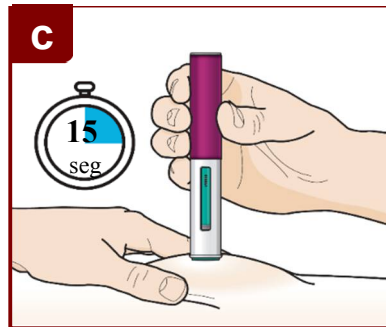


Mantenga firmemente presionado durante 15 segundos. Oirá un segundo “click”. El segundo click indica que la inyección ha terminado. El émbolo verde ocupará la ventana de visión por completo.

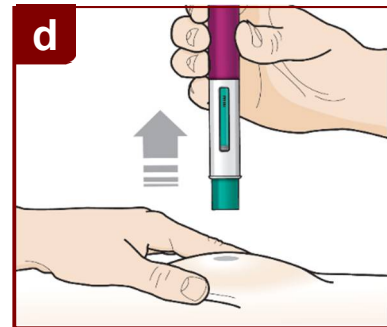

Levante la pluma de Fasenra verticalmente hacia arriba. El protector de la aguja se deslizará hacia abajo y se bloqueará cubriendo la aguja.



Paso 8 - Compruebe la ventana de visión

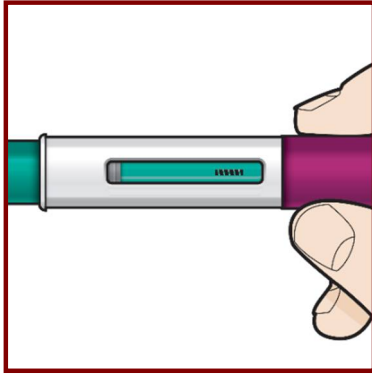

Compruebe la ventana de visión para asegurarse de que todo el líquido se ha inyectado.


Si el émbolo verde no ocupa por completo la ventana de visión, puede que no haya recibido la dosis completa. Si esto ocurre o tiene alguna otra preocupación, llame a su profesional sanitario.

Antes de la
inyección

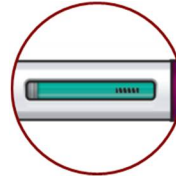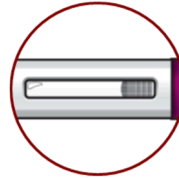

Después de la
inyección

Paso 9 – Compruebe el lugar de la inyección

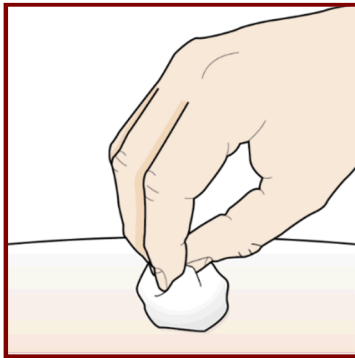

Puede que haya una pequeña cantidad de sangre o líquido donde se ha inyectado. Esto es normal.

Presione suavemente sobre la piel con una bola de algodón o una gasa hasta que pare el sangrado.

No frote el lugar de la inyección.

Si fuera necesario, cubra el lugar de la inyección con un pequeño apósito.

Paso 10 – Deseche la pluma de Fasenra usada de forma segura



- Cada Fasenra Pen contiene una única dosis de Fasenra y **no puede ser reutilizada**.
- Deposite su Fasenra Pen usada en un **contenedor para objetos punzantes** inmediatamente después de su uso.

No tire la pluma de Fasenra en su basura doméstica.

Tire la capucha y cualquier otro material usado en su basura doméstica.

Guía para desechos

Deshágase del contenedor en su conjunto acorde a las instrucciones de su profesional sanitario o farmacéutico.

No recicle su contenedor de objetos punzantes.